



## Unique-näytteenottoventtiilit

### Lisävarusteet - Varoventtiili

#### Konsepti

Varoventtiili on paineventtiili, joka on tehty varmistamaan höyrynpaine Unique-näytteenottoventtiilin steriloinnin aikana.


#### Toimintaperiaate

Varoventtiili on suunniteltu varmistamaan, että oikea paine ja lämpötila saavutetaan, kun näytteenottoventtiili höyrysteriloidaan ennen näytteiden ottamista ja sen jälkeen.

Paineventtiili on asetettu varmistamaan 2 baarin paine 121 °C:n lämpötilassa, joka on steriloinnin suositeltu lämpötila.

Venttiili on valmistettu eristävästä materiaalista, mikä mahdollistaa helpon käsittelyn höyrytyksen yhteydessä.

Varoventtiiliä käytettäessä Unique-näytteenottoventtiili steriloituu 2 minuutin höyrytyksen aikana.

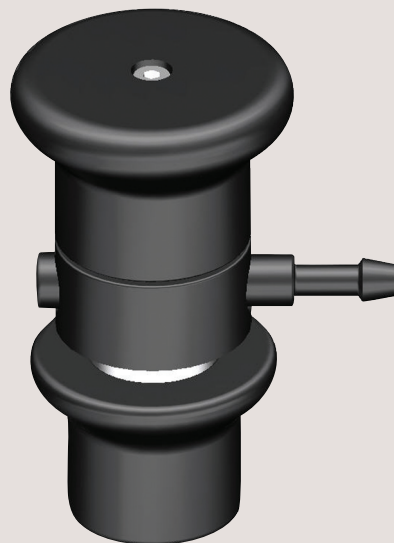

#### TEKNISET TIEDOT

##### Lämpötila

Lämpötila-alue: . . . . .1 - 130 °C

Korkein sterilointilämpötila, kuivahöyry: . . . .130 °C

##### Paine

Maks.käyttöpaine: . . . . .600 kPa (6 bar)

Min.käyttöpaine: . . . . .0 kPa (0 bar)

#### FYYSISET TIEDOT



##### Materiaalit

Teräsosat: . . . . . 1.4301 (304)

Muut osat . . . . . PA 6,6 30% GF

Kalvotiiviste: . . . . . EPDM

Mitat:

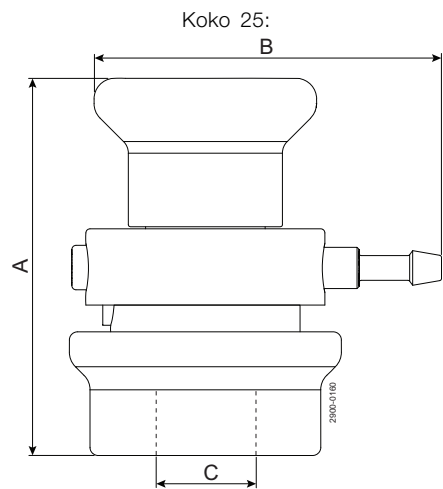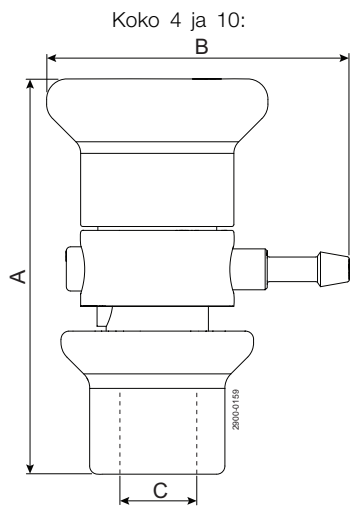

| Koko 4 ja 10: |      |    | Koko 25: |      |    |
|---------------|------|----|----------|------|----|
| A             | B    | C  | A        | B    | C  |
| 96.5          | 70.7 | 14 | 91.5     | 90.3 | 30 |

Tiedot vastaavat julkaisuhetken tietoja, oikeudet muutoksiin pidätetään.  
ALFA LAVAL on Alfa Laval Corporate AB:n rekisteröimä ja omistama  
tuotemerkki.

ESE02443FI 1304

© Alfa Laval